




# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet V-Fin Depressor 5kg ( 438 417 )

## Vật giăng vây chữ V (V-Fin Depressor) 5kg

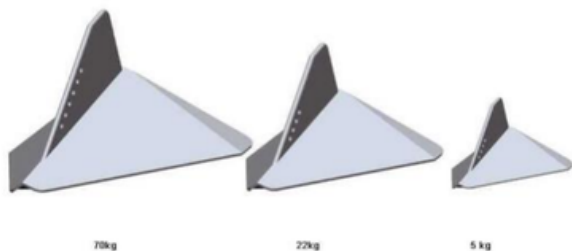

Vật giăng vây chữ V tạo ra lực nâng âm cho dây kéo trong quá trình vận hành lưới plankton theo chiều ngang hoặc xiên. Điều này cũng giúp ổn định lưới trong nước và mang lại kết quả lấy mẫu tốt. Thiết bị bao gồm một thân nặng chì và một dây cáp thép không gỉ kèm theo khoen.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	380mm
Chiều rộng	400mm
Chiều cao	250mm
Trọng lượng trên không	5kg
Vật liệu	Nhôm anod hóa, chì
Mã sản phẩm	438 417